

⚠ 주의 사항

※ 다음 사항에 해당되거나, 의사의 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 먼저 의사와 상담한 후 사용해 주시기 바랍니다.

- 임신 중이거나 몸상태가 좋지 않거나 신체에 변형이 있는 경우
- 다리, 발 부위에 통증을 느끼는 경우
- 페이스 메이커, 제세동기 등 전자파 영향을 받기 쉬운 개인 의료 장비를 사용하고 있는 경우
- 수술용 핀, 나사 또는 기계적인 장비를 신체에 이식한 경우
- 심장 장애가 있는 경우
- 혈전증, 동맥류, 급성 정맥류 또는 기타 순환기 질환으로 인해 의사가 마사지를 금지한 경우
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우

원더스 마사지기 MassKing M13 빠른 사용 설명서

WONDERS


서비스 및 소모품 구입 문의
www.wondersliving.com
서비스센터 : 1522-5855
상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00
(점심시간 / 13:00 ~ 14:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

간단사용법



- 제품 사용 전 동봉된 설명서를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하신 후 사용해주시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

■ 충전하기

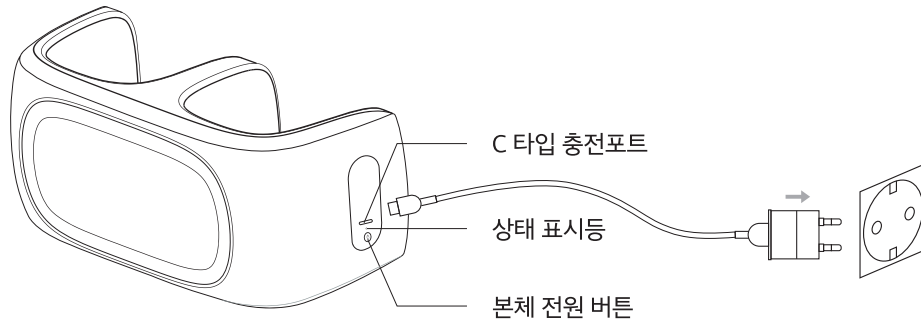


· 최초 사용시 동봉된 C타입 충전케이블을 충전기에 연결한 후, 콘센트에 꽂아 충전한 후 사용해주세요. (최대 충전 정격 DC 5V 2A)

· 충전 중엔 표시등이 빨간색으로 유지되며, 충전이 완료되면 초록색으로 바뀝니다.

※ 배터리 성능 유지를 위해 충전 중에는 제품이 작동하지 않습니다. 충전을 완료한 후 사용해 주세요.

■ 사용하기

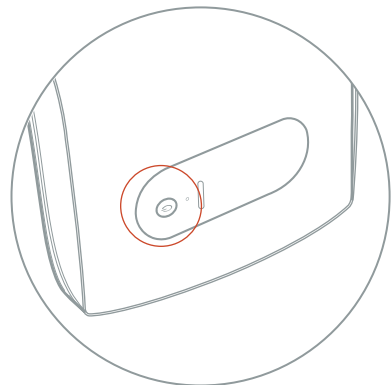

사용법1 : 본체 버튼으로 조작

- ① 본체의 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- ② 전원이 켜진 후 버튼을 누를 때마다 자동->다리->무릎->발 순으로 모드가 전환됩니다.
- ③ 마사지는 작동시작 15분 후에 자동으로 종료되며, 대기모드가 됩니다. 작동 중 혹은 대기모드 시에는 본체 버튼을 길게 눌러 전원을 끌 수 있습니다

사용법2 : 리모컨으로 조작


- ① 본체의 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- ② 리모컨 전원버튼을 누르면, 자동모드가 시작됩니다.
- ③ 리모컨으로 원하는 마사지 모드를 선택할 수 있습니다.
- ④ 마사지는 작동시작 15분 후에 자동종료되며 대기모드가 됩니다. 이때 리모컨의 표시등도 꺼집니다.

※ 대기모드 시 1시간 동안 마사지기를 사용하지 않으면 제품이 자동으로 꺼집니다.

■ 다양한 부위 마사지하기

아래 사용 예시 그림을 참고하여 사용해 주세요.

허벅지 마사지

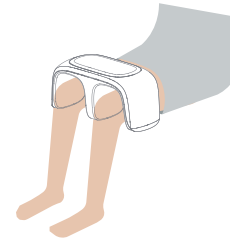

종아리 마사지



무릎 마사지



발 마사지



※ 무릎 사용 시 온열 패드를 앞쪽으로 펼쳐 사용해 주세요.