

원더스 마사지기
MassKing M17
사용자 매뉴얼



제품설명서



- 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하시기 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 설명서에는 제품 보증서를 포함하고 있습니다. 구입하신 영수증과 함께 보관해 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.

1. 안전을 위한 주의사항

※ 안전에 관련된 경고, 주의사항들은 제품을 안전하게 사용하여 재산상의 손해를 막기 위한 내용으로 반드시 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.



경고

- 신체, 지적 또는 정신적 장애가 있으신 분, 제품사용에 대한 지식이나 경험이 부족한 분은 안전을 위해 보호자의 감독 없이는 절대 사용을 금합니다.
- 본 제품은 가정용으로 설계된 제품으로 치료기 또는 의약품이 아니므로 치료 목적으로 사용하지 마십시오.
- 반드시 정격 전압(220V~, 60Hz)이 맞는지 확인한 후 사용해주세요.
- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오. 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 젖은 손으로 제품 또는 전원플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아당겨 빼지 마십시오.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 망가뜨리지 마십시오. 화재 또는 감전으로 인한 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 몸이 젖은 상태로 마사지기를 사용하지 마십시오. 감전 또는 화상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 한개의 콘센트에 여러 제품의 전원플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요. 화재로 인한 상해의 위험이 있을 수 있습니다.
- 실외에서 천둥, 번개가 칠 경우 제품을 사용하지 마세요. 제품이 고장나거나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품을 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마십시오.
- 제품을 화기 부근 또는 습기가 많은 곳, 욕실 등에서 사용하지 마십시오.
- 사용 중 신체에 고통이나 이상을 느끼실 경우 즉시 사용을 중단하시고 의사와 상담 후 그 지시에 따르십시오.
- 제품을 실내온도(0℃~35℃)이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오. 특히 어린이가 올라타서 장난을 하지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 옆으로 눕혀 놓거나 뒤집는 등 제품을 함부로 취급하지 마십시오. 본 제품은 평평하고 안정된 장소에서만 사용해 주십시오.

2. 사용시 주의사항



경고



※ 다음 사항에 해당되거나, 의사의 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 먼저 의사와 상담한 후 사용해주시요.

- 임신 중이거나 몸상태가 좋지 않거나 신체에 변형이 있는 경우
- 다리, 발 부위에 통증을 느끼는 경우
- 페이스 메이커, 제세동기 등 전자파 영향을 받기 쉬운 개인 의료 장비를 사용하고 있는 경우
- 수술용 핀, 나사 또는 기계적인 장비를 신체에 이식한 경우
- 심장 장애가 있는 경우
- 혈전증, 동맥류, 급성 정맥류 또는 기타 순환기 질환으로 인해 의사가 마사지를 금지한 경우
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우

- 다리와 발의 물기를 완전히 제거한 후 사용 하십시오. 감전의 우려가 있습니다.
- 발찌 등의 액세서리를 제거한 후 사용해 주세요.
- 아이들이 본체를 가지고 놀거나 기기를 조작하지 않도록 하십시오. 기기에 아이들의 손이나 발이 끼지 않도록 주의하십시오.
- 기기를 화기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 제품에 무거운 물체를 올려놓지 마십시오. 특히 어린아이가 올라타서 장난을 하지 않도록 주의하십시오.
- 제품에 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 다리와 발이 젖은 상태에서 사용하지 마십시오.
- 다리와 발에 상처가 있을 경우 사용하지 마십시오.
- 작동 중 일어나지 마십시오. 고장의 가장 큰 원인이 됩니다.
- 천커버가 찢어진 상태에서는 사용하지 마십시오.
- 기기를 임의로 조작, 개조하는 행위를 금합니다.
- 음주 후 또는 취침시나 수면중에는 절대 사용하지 마십시오.
- 영 유아 어린이는 사용하지 마십시오.
- 제품에서 발열이 심할 경우 제품 사용을 잠시 중단하십시오. (제품에서 열이 발생한 상태로 피부와 오랜시간 접촉하게 될 경우 붉은 반점, 색소침착 등 저온화상의 우려가 있습니다)
- 피부가 민감하신 분들은 온열 작동부위가 피부와 맞닿는 경우, 저온 화상의 우려가 있으니 반드시 온열 기능을 끈 상태로 사용하시기 바랍니다.
- 마사지 중 신체에 이상을 느끼거나, 통증이 오면 사용을 즉시 중지하십시오. 마사지 중 강도가 너무 세다고 느껴질 때는 전원버튼을 눌러 마사지 작동을 중단하십시오.
- 본 기기는 자동 타이머가 설정되어, 기본 작동 시간(15분)이 지나면 자동으로 종료됩니다. 연속사용은 신체에 무리를 줄 수 있으므로 가급적 삼가시기 바랍니다. 또한 제품을 처음 사용할 시, 근육에 무리가 가지 않도록 5분 이내로 사용하시고 사용이 익숙해지면 점차 마사지 시간을 늘려 주시기 바랍니다.

3. 제품 사용하기

■ 각 부분의 명칭

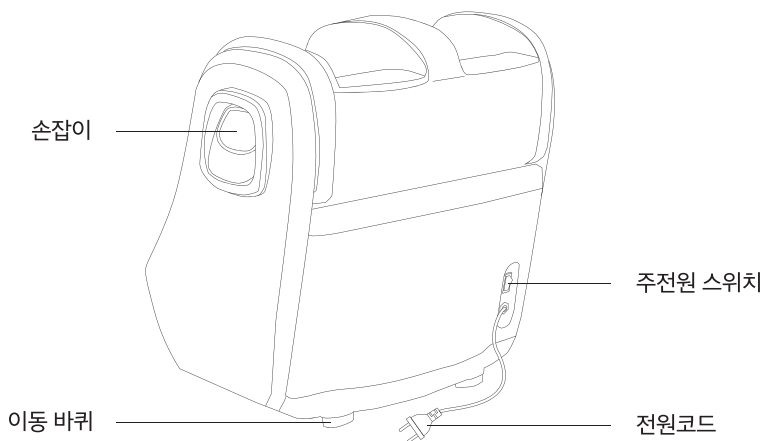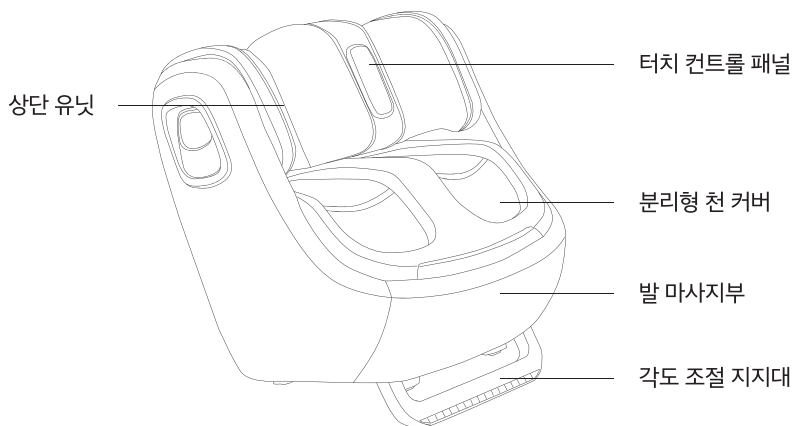

터치식 조작부



전원 버튼

전원을 켜고 끌 수 있습니다.

- 대기 중일 때 전원버튼을 누르면 모든 마사지 기능이 작동됩니다.
- 대기 중일 때 버튼이 **연두색**으로 깜박입니다.
- 작동 중일 때 버튼이 **파란색**으로 표시됩니다.



온열 모드 버튼

온열기능을 끄고 켤 수 있습니다.

- 온열이 켜진 경우 버튼이 **파란색**으로 표시됩니다.



종아리 마사지 버튼

종아리 부위 마사지 기능을 끄고 켤 수 있습니다.

- 종아리 마사지기능이 켜진 경우 버튼이 **파란색**으로 표시됩니다.



압력 세기 버튼

공기압 강도를 조절할 수 있습니다.

- 전원을 켜면 중간 세기(**파란색**)의 공기압으로 작동됩니다. 버튼을 눌러 사용자에게 알맞은 세기로 변경할 수 있습니다. 압력세기 버튼을 누르면 3단계(**약/중/강**)로 전환되고, 버튼의 색깔에 따라 세기를 확인할 수 있습니다.

- **초록색**: 약함

- **파란색**: 중간

- **빨간색**: 강함



발 마사지 버튼

발 부위 마사지 기능을 끄고 켤 수 있습니다.

- 발 마사지 모드가 켜진 경우 버튼이 **파란색**으로 표시됩니다.
- ※ 발 마사지 모드가 꺼진 상태에도 발바닥 두드림은 그대로 작동됩니다.



두드림 버튼


두드림 기능을 끄고 켤 수 있습니다.

- 두드림 모드가 켜졌을 때 버튼에 **파란색**으로 표시됩니다.


■ 제품 사용방법



1. 제품을 평평한 곳에 놓은 후 본체 바닥에 있는 각도 조절 지지대를 펼치고 전원코드를 콘센트에 연결해주세요.

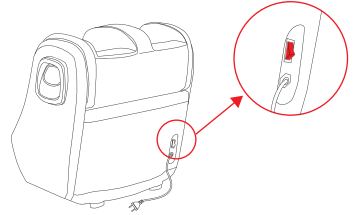

2. 마사지기 뒷면에 있는 주전원 스위치  를 켜고, **빨간색 불**이 들어오는지 확인해 주세요.

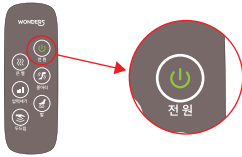

3. 조작부의 전원버튼이 **연두색**으로 깜빡이는지 확인해 주세요.




4. 전원버튼을 다시 한번 누르면 모든 버튼에 **파란색** 등이 켜지며 마사지가 시작됩니다.

※ 사용 도중이라도 마사지를 중단할 때는 전원버튼을 눌러 종료할 수 있습니다.

5. 기기 작동 중에 버튼을 눌러 원하는 마사지를 선택하면 선택된 마사지 프로그램이 즉시 실행됩니다.
6. 모든 마사지는 15분 후 자동으로 종료되며, 종료된 후 전원버튼은 **연두색** 등으로 깜박입니다.
7. 마사지기에서 다리를 뺀 후 주전원 스위치  를 눌러 전원을 완전히 꺼 주시기 바랍니다.

■ Tip

종아리 마사지 강도 높이기

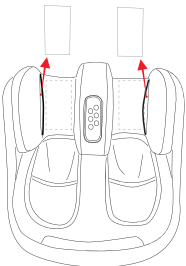


- 필요에 따라 종아리 부위의 마사지 강도를 높일 수 있습니다.
- 마사지기의 전원을 끄고, 좌측 그림과 같이 마사지기 상단 유닛의 좌우 안쪽에 있는 스펀지 패드를 빼 주세요.
- ※ 이전 보다 더 강한 마사지를 받을 수 있습니다.

Tip

허벅지와 무릎 사용시

- 상단 유닛은 약 140도까지 각도 조절이 가능합니다.
아래 그림을 참조하여 원하는 마사지 부위에 따라 각도 조절을 해주세요.

※ 무리하게 힘을 주어 조절 시 고장의 우려가 있으니 천천히 조절해 주세요.

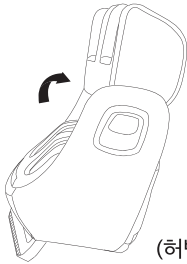

(허벅지 사용시)



(무릎 사용시)

모드별 주요 특징

1. 온열 모드

발등과 종아리 옆면을 따뜻하게 해 주는 온열 기능이 있어 마사지의 효과를 더욱 증대시켜줍니다.

※ 개인 차에 따라 온도가 뜨겁거나 미지근하게 느껴질 수 있습니다.

2. 종아리 마사지 모드

종아리 부위에 회전롤러가 장착되어 공기압 마사지와 함께 롤러마사지를 느끼실 수 있으며, 더욱 디테일한 종아리 마사지가 가능합니다.

3. 발 마사지 모드

발바닥 앞부분과 뒷부분에 지압봉이 장착된 지압롤러를 적용하여 공기압 마사지와 지압 마사지가 동시에 작동함으로써 피로해소에 도움을 줍니다.

4. 공기압 마사지 기능

대형 에어셀에 의해 발과 발목, 종아리부위에 전문적인 마사지가 가능하며 특히, 아킬레스건 부위의 지압볼과 종아리부위의 지압볼에 의해 깊은 마사지가 가능합니다.

5. 두드림 모드

지압봉에 의한 직타 두드림 기능으로 공기압 및 지압롤링 마사지와 함께 발바닥과 발근육에 깊이 작용하여 피로해소에 도움을 줍니다.

4. 유지 및 관리하기

■ 사용 후 보관 방법

1. 사용이 끝나면 주전원 스위치를 끄고 전원코드를 콘센트에서 분리해주세요.
2. 직사광선이나 고온 다습한 환경을 피해 서늘한 곳에 보관해주세요.
3. 어린아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주세요.
4. 이동시 제품 하단 각도조절 지지대를 원위치로 접은 후 이동해 주세요.

■ 관리 및 청소 방법

1. 제품을 청소하기 전에 주전원 스위치를 꺼주시고 전원코드를 콘센트에서 분리해주세요.
2. 주기적으로 먼지를 닦아주시고, 장기간 사용하지 않을 경우 먼지가 쌓이는 것을 방지하기 위해 깨끗한 천으로 닦아주세요.
3. 다리와 발 마사지부는 휴대용 청소기로 각질 등 먼지를 제거해 주세요.
4. 천 커버는 지퍼를 열어 분리할 수 있습니다. 오염 시 가볍게 세탁하여 완전히 건조시킨 뒤 지퍼를 닫아 장착하여 사용해 주십시오.
5. 터치 컨트롤패널은 깨끗한 마른 천으로 닦아주시고 절대 물로 닦지 마십시오.

5. 문제해결

■ 이상 증상 시 조치 사항

증상	해결 방안
갑자기 작동이 멈추거나 작동되지 않음	전원 코드가 잘 꽂혀 있는지 확인해주세요.
	제품 후면 하단 주전원 스위치가 켜져있는지 확인해주세요.
	제품을 장시간 사용시 과열 방지를 위해 일시적으로 멈출 수 있습니다. 약 1시간 정도 경과 후 다시 사용해 주세요.
	마사지기는 기본 작동시간 15분 후에 자동 종료됩니다. 작동시작 후 15분이 경과하였는지 확인해주세요.

■ 제품 사양



제품명	전기마사지기
모델명	MassKing M17
본체크기	579(L) X 489(W) X 594(H) mm
본체무게	16.5 Kg
정격전압	220V~, 60Hz
자동타이머	15분
소비전력	95W
제 조 국	중국(OEM)
판매원	(주)원더스리빙 (고객상담: 1522-5855)

6. 유상 서비스 처리 기준

- 무상 품질 보증기간이 경과한 경우
- 소비자의 취급 부주의 또는 잘못된 수리, 개조하여 고장 발생 시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생된 경우
- 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
- (주)원더스리빙 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생 시
- 미지정 소모품이나 수리 자재 사용으로 고장 발생 시
- 신나, 벤젠 등 유기 용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 사용설명서 내의 '주의 사항'을 지키지 않아 고장 발생 시
- 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 고장 발생 시
- 천재지변(낙뢰, 화재, 지진, 풍수 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우
- 제품 고장이 아닌 단순 점검 요청의 경우
- 해외에서 구매한 제품이거나 해외에서 사용 중에 고장이 발생된 경우

※ 본 제품의 외관, 디자인 및 제품 규격은 제품의 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

본 제품은 1년 무상 서비스 기간을 보장합니다. (소모품 제외)

- 1. 본 제품은 엄격한 품질관리와 생산과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
- 2. 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우
(주)원더스리빙 서비스센터에서 보증기간 동안 무상 수리 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 3. 무상기간 산정은 구매일로부터 1년으로 정합니다.
- 4. 무상보증 기간 내에 수리진행에 있어 제품 교환 수리가 이루어지는 경우도 수리로 간주합니다.
- 5. 무상 보증기간이라 하더라도 부주의로 인한 고장 시 유상 비용이 청구될 수 있습니다.
- 6. 보증서는 재발행되지 않으므로 영수증과 함께 소중히 보관해 주세요.
- 7. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 명		전 기 마 사 지 기			
모 델 명					
구 입 일		년	월	일	보 증 기 간 1 년
구 입 처					
고객	성명				
	연락처				
	주소				



서비스 및 소모품 구입 문의

www.wondersliving.com

서비스센터 : 1522-5855

상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00 (점심시간 / 13:00 ~ 14:00)

토, 일요일, 공휴일 제외

서울시 강서구 양천로47길 20 (원더더스리빙 고객 서비스센터

/ 지번주소 : 서울특별시 강서구 마곡동 14-20
