


Tip

종아리 마사지 강도 높이기

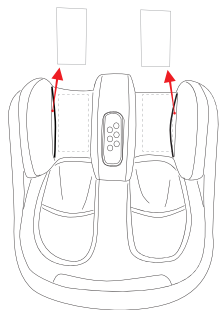


- 필요에 따라 종아리 부위의 마사지 강도를 높일 수 있습니다.
- 마사지기기의 전원을 끄고, 좌측 그림과 같이 마사지기 상단 유닛의 좌우 안쪽에 있는 스펀지 패드를 빼 주세요.
- ※ 이전 보다 더 강한 마사지를 받을 수 있습니다.

허벅지와 무릎 사용시

- 상단 유닛은 약 140도까지 각도 조절이 가능합니다.
- 아래 그림을 참조하여 원하는 마사지 부위에 따라 각도 조절을 해주세요.

※ 무리하게 힘을 주어 조절 시 고장의 우려가 있으니 천천히 조절해 주세요.

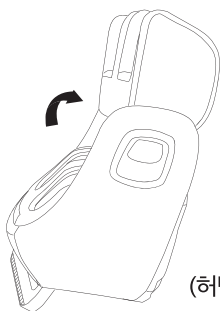

(허벅지 사용시)



(무릎 사용시)

원더스 마사지기 MassKing M17 빠른 사용 설명서

WONDERS

서비스 및 소모품 구입 문의
www.wondersliving.com
서비스센터 : 1522-5855
상 담 시 간 : 월~금요일 10:00 ~ 17:00
(점심시간 / 13:00 ~ 14:00)
토, 일요일, 공휴일 제외

간단사용법



- 제품 사용 전 동봉된 설명서를 주의 깊게 읽고 사용 방법을 숙지하신 후 사용해주시 바랍니다.
- 고객의 안전과 올바른 사용을 위해 반드시 필요하니 보관하여 주세요.
- 본 제품은 국내에서만 사용하도록 만들어졌습니다.




경고


※ 다음 사항에 해당되거나, 의사의 치료를 받고 있는 경우에는 반드시 먼저 의사와 상담한 후 사용해주시요.

- 임신 중이거나 몸상태가 좋지 않거나 신체에 변형이 있는 경우
- 다리, 발 부위에 통증을 느끼는 경우
- 페이스 메이커, 제세동기 등 전자파 영향을 받기 쉬운 개인 의료 장비를 사용하고 있는 경우
- 수술용 핀, 나사 또는 기계적인 장비를 신체에 이식한 경우
- 심장 장애가 있는 경우
- 혈전증, 동맥류, 급성 정맥류 또는 기타 순환기 질환으로 인해 의사가 마사지를 금지한 경우
- 알레르기 질환이 있거나, 민감성 피부인 경우


제품 사용방법

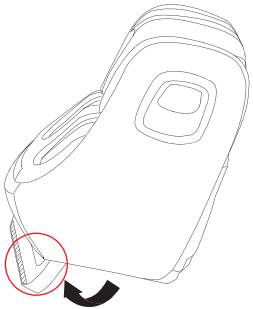

1. 제품을 평평한 곳에 놓은 후 본체 바닥에 있는 각도 조절 지지대를 펼치고 전원코드를 콘센트에 연결해주세요.

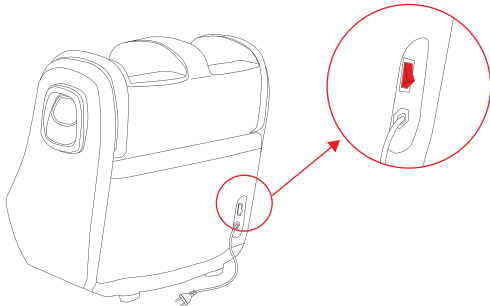

2. 마사지기 뒷면에 있는 주전원 스위치  를 켜고, **빨간색 불**이 들어오는지 확인해 주세요.

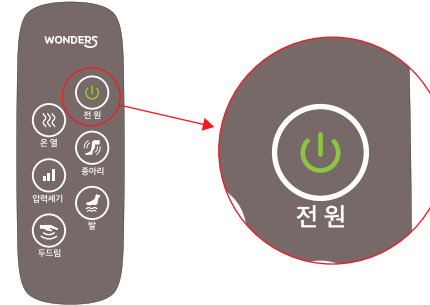

3. 조작부의 전원버튼이 **연두색**으로 깜빡이는지 확인해 주세요.



4. 전원버튼을 다시 한번 누르면 모든 버튼에 **파란색** 등이 켜지며 마사지가 시작됩니다.

※ 사용 도중이라도 마사지를 중단할 때는 전원버튼을 눌러 종료할 수 있습니다.

5. 기기 작동 중에 버튼을 눌러 원하는 마사지를 선택하면 선택된 마사지 프로그램이 즉시 실행됩니다.
6. 모든 마사지는 15분 후 자동으로 종료되며, 종료된 후 전원버튼은 **연두색** 등으로 깜빡입니다.
7. 마사지기에서 다리를 뺀 후 주전원 스위치  를 눌러 전원을 완전히 꺼 주시기 바랍니다.